

EPSA[®] *safety first*


**CATÉTER PARA
CISTOMETRÍA**

CATÉTER PARA CISTOMETRÍA

CÓDIGO: 9504 adulto – 9503 pediátrico

1 catéter de PVC, doble lumen; lumen de llenado con dos orificios en extremo distal y conector Luer azul, lumen de registro con un orificio en extremo distal y conector Luer blanco.
Marcas de profundidad.

ESTÉRIL, ENVASE INDIVIDUAL, USO ÚNICO.

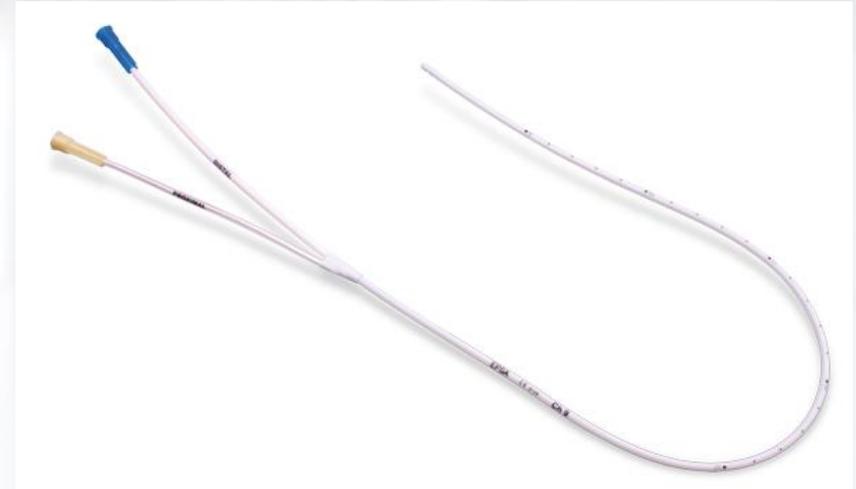

Medidas

Pediatrico Ch 6,0 / 7,0 / Long. 32 cm.
Adulto Ch 6,0 / 7,0 / 9,0 / Long. 52 cm.

Recomendaciones de uso

Recomendación de un profesional sobre el uso de la tecnología.

El Catéter para Cistometría está indicado en la realización de estudios urodinámicos del tracto urinario inferior. La cistometría es una prueba diagnóstica que se utiliza para medir la presión intravesical en relación con el volumen de líquido vesical.

Permite valorar la existencia de una disfunción miccional en las etapas de llenado, almacenamiento y/o vaciamiento vesical. Muestra la actividad del músculo detrusor y la sensibilidad y capacidad de contracción y relajación de la pared vesical en reposo y en relación con algunos estímulos.

