


EPSA[®] *safety first*

CATÉTER URETERAL

CATÉTER URETERAL

CÓDIGOS: 9460 (Chevassu) / 9461 (abierto, punta curva) / 9462 (punta cilíndrica, un ojo) / 9464 (punta biselada, un ojo) / 9465 (punta abierta, un ojo) / 9466 (punta abierta, dos ojos) / 9467 (abierto punta curva, un ojo) / 9468 (punta biselada, dos ojos) / 9470 (punta cilíndrica, dos ojos) / 9471 (cilíndrica, punta curva, dos ojos) / 9472 (punta abierta) / 9473 (punta oliva, dos ojos) / 9474 (abierto, punta curva, dos ojos) / 9475 (curvo, punta cilíndrica, un ojo).

1 catéter de PUR, con amplia variedad de puntas, radiopaco, graduado en cm. (para procedimientos diagnósticos y terapéuticos).
 1 fiador de acero inoxidable
 1 conector Luer

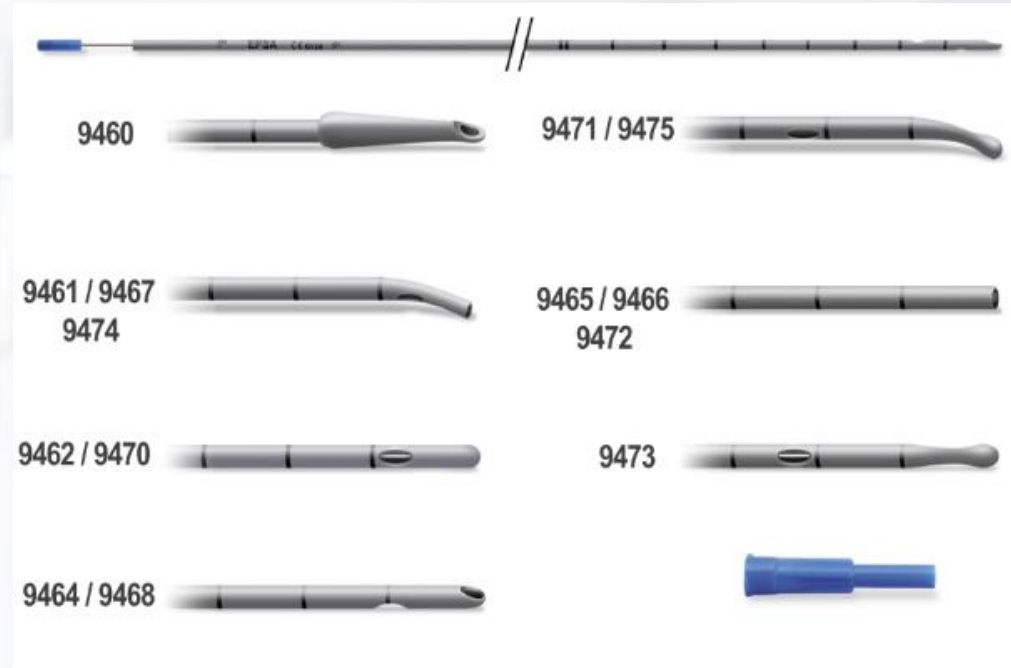

Medidas

Ch 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0
 EXCEPTO CÓDIGO 9460 Ch 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0

ESTÉRIL, ENVASE INDIVIDUAL, USO ÚNICO.

Recomendaciones de uso

Recomendación de un profesional sobre el uso de la tecnología.


El Catéter Ureteral está indicado con:
Finalidad diagnóstica:

- Realización de estudios imagenológicos contrastados de la vía excretora urinaria (ureterorenografía retrógrada) estando indicado específicamente el Catéter Ureteral Chevassu.

- Obtención de muestras de orina en forma directa a nivel ureteral para estudios bacteriológicos, citológicos, etc.

Finalidad terapéutica:

- Procesos patológicos obstructivos congénitos o adquiridos, intrínsecos o extrínsecos, que comprometen el flujo urinario normal a través del uréter.

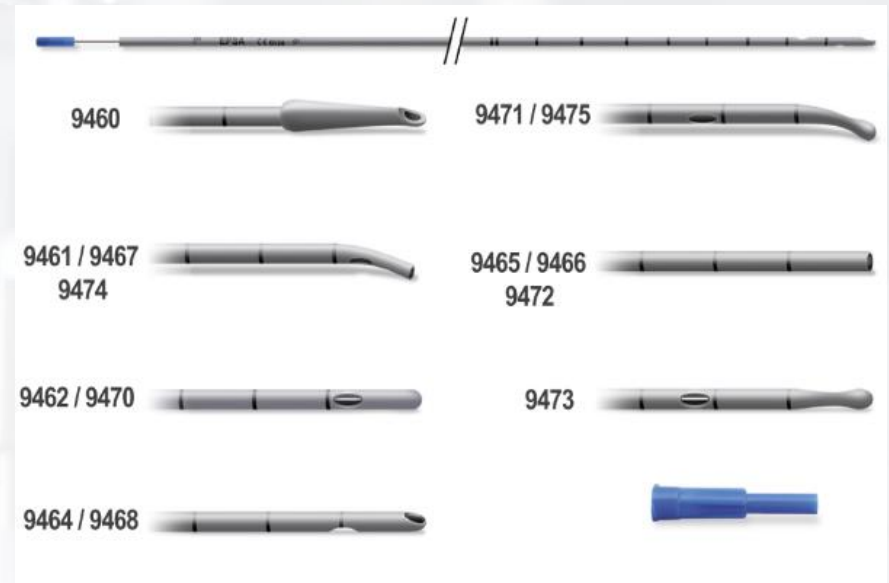

Causas de obstrucción:

- . intraluminal: litiasis urinaria: cálculos y arenilla; coágulos; cuerpos extraños;
- . parietal: tumores de uréter; cicatrices;
- . extrínseca: compresión por tumores de vecindad; compresión por adenopatías; fibrosis retroperitoneal; ligaduras del uréter (iatrogénicas).