


EPSA[®] *safety first*

**SET PARA NEFROSTOMIA
CON CATÉTER PIGTAIL**

SET PARA NEFROSTOMIA CON CATÉTER PIGTAIL

CÓDIGO: 9692 - 9693 (Presentación sin bandeja)

- 1 catéter de PUR radiopaco, superficie suave, flexible, extremo renal enrollable con orificios de drenaje, punta cilíndrica con abertura central coaxial. Pieza de ayuda para introducción. Conector Luer-lock separable.
- 1 set de punción percutánea.
- 1 fiador de acero inoxidable teflonizado, (punta "J" de seguridad y pieza de rectificación)
- 1 set de dilatadores huecos, (calibres progresivos)
- 1 tubo de conexión con: extremo Luer-lock hacia catéter, embudo en extremo hacia bolsa colectora
- 1 llave dos vías

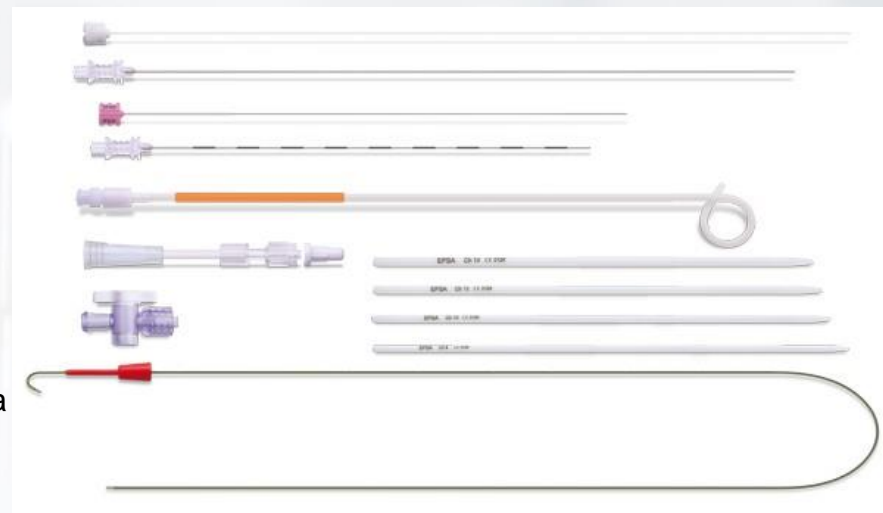

Medidas

Ch 6,0 / 8,0 / 10,0 / 12,0

ESTÉRIL, ENVASE INDIVIDUAL, USO ÚNICO.

Recomendaciones de uso

Recomendación de un profesional sobre el uso de la tecnología.

El Set de Nefrostomía con Catéter Pigtail está indicado cuando se realiza una nefrostomía, que consiste en comunicar la vía excretora urinaria con el exterior, a nivel de las cavidades renales, cuando existe una alteración o interrupción del flujo urinario trans ureteral. La aplicación del catéter de nefrostomía permite:

- descomprimir un sistema obstruido y mantener o mejorar la función renal alterada por la obstrucción ureteral,
- obtener acceso a la pelvis renal para procedimientos radiológicos.

