

EPSA[®] *safety first*


**TUBO ENDOTRAQUEAL ANGULADO
ORAL, SIN BALÓN**

TUBO ENDOTRAQUEAL ANGULADO ORAL, SIN BALÓN

CÓDIGO:9205

1 tubo de PVC, anatómico, transparente, graduado en cm., línea longitudinal radiopaca a rayos- X, orificio distal pulido, atraumático.
Ojo Murphy. Conector estándar semimontado

ESTÉRIL, ENVASE INDIVIDUAL, USO ÚNICO

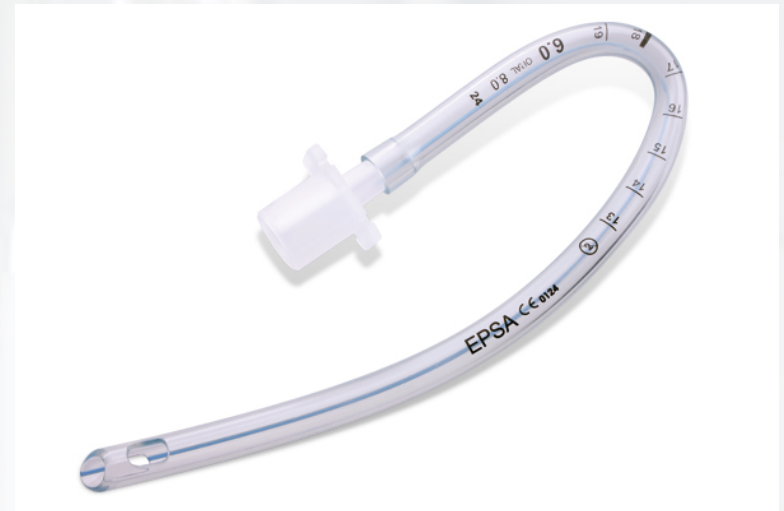

Medidas

3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 /
6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 mm

Recomendaciones de uso

El Tubo Endotraqueal Angulado oral, sin balón está indicado para la intubación anestésica

en procedimientos quirúrgicos de cabeza y cuello, con especial énfasis en cirugía otorrinolaringológica (oído, nariz y buco-laríngea) y en cirugía oftalmológica.

La finalidad de su utilización es:

- permitir una disposición diferente del montaje de la sonda nasotraqueal al equipo de anestesia, disminuyendo la posibilidad de acodaduras y desconexiones, mejorando la seguridad de todo el circuito;
- disminuir la cantidad de conectores cerca del área quirúrgica con lo cual mejora la visibilidad y operatividad del cirujano;
- reducir el traumatismo de estructuras orales, logrando una mejor adaptación anatómica que los tubos endotraqueales convencionales.

